



eMed
Equipos y Consumibles Médicos

MAHURKAR TM* ELITE

**Familia de Catéteres para
Diálisis Aguda**



FÁCIL DE USAR

DURANTE LA INSERCIÓN

Diseño mejorado con punta verde, suave y atraumática:

- 1.-Diseñado para reducir la probabilidad de trauma del vaso in situ. 3
- 2.- Brinda óptimo funcionamiento y más fácil inserción

Material de poliuretano termo-sensible: Brinda óptima rigidez durante la inserción y se suaviza al menos un 54% posterior a la inserción, para conformidad del vaso y comodidad del paciente.

Catéter graduado:

Ayuda al personal médico con una graduación visual durante la inserción del catéter

Bifurcación del catéter reforzado

Reduce la probabilidad de acodamiento en casos de difícil inserción.

FÁCIL DE USAR

DURANTE EL TRATAMIENTO

Altas tasas de flujo:

1 Reduce potenciales alarmas de la máquina y entrega mayores dosis de diálisis al ser requeridas.

 **Volúmenes de cebado grabados por láser de fácil lectura en los clamps de las extensiones del catéter**

 **Marcas de profundidad en el tubo de inserción del catéter:**

Ayuda al personal médico con una graduación visual durante la inserción del catéter.

 **Múltiples configuraciones curvas del catéter**

Aumenta opciones de inserción y de comodidad para el paciente


MAHURKAR™* ELITE CATÉTER DE DOBLE LUMEN 12FR

Logra, de manera consistente, tasas de flujo de hasta 400mL/min¹

Indicados para hemodiálisis, aféresis e infusión,


Catéteres disponibles en:

- Extensiones rectas
- Extensiones curvas
- Extensiones precurvadas

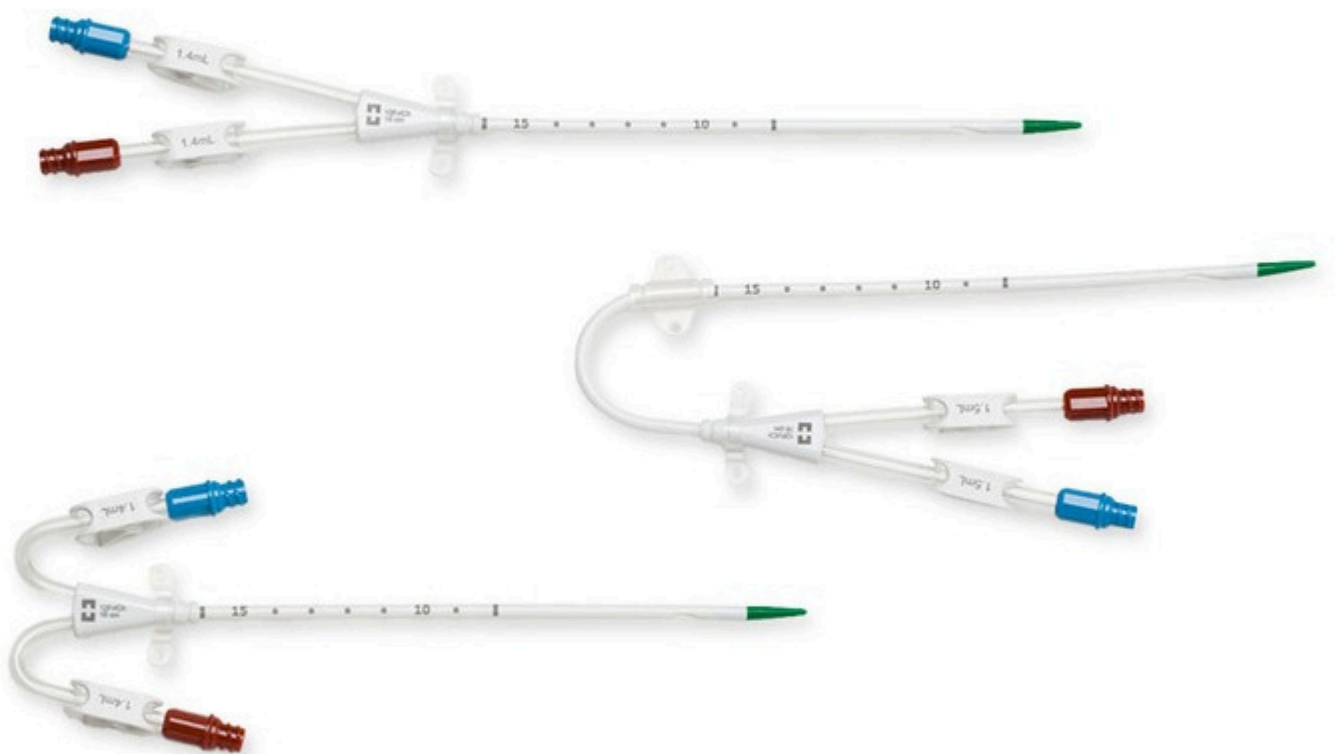

MAHURKAR™* ELITE CATÉTER DE DOBLE LUMEN DE ALTO FLUJO 13.5FR

Tasas de flujo de hasta 450mL/min.^{1,†}

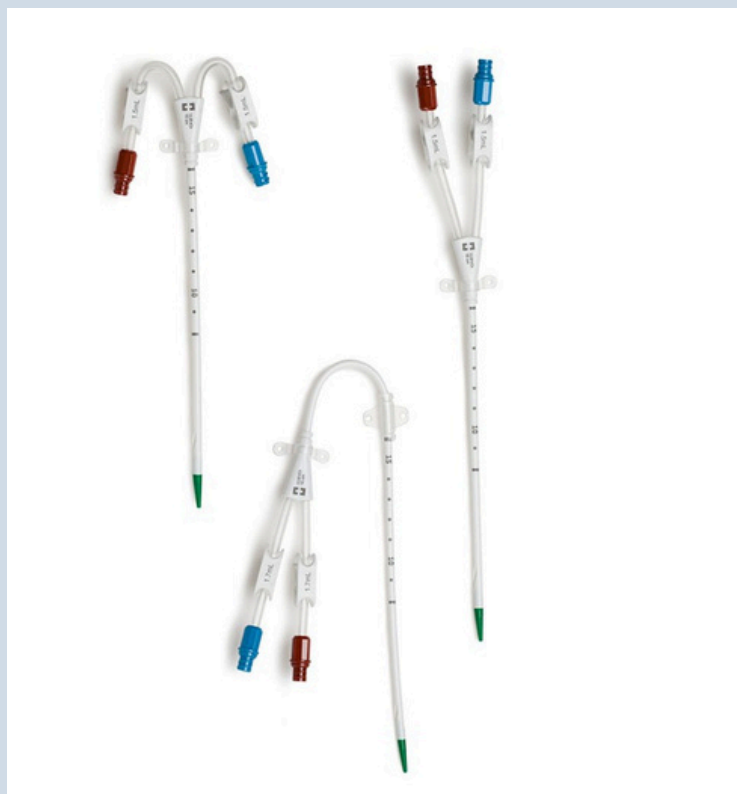

Diseño de punta simétrica minimiza las tasas de recirculación a menos de 1% en flujos de avance normal y líneas invertidas

La inserción se suaviza hasta un 54%¹

Grandes ranuras laterales cortadas con láser

Punta verde suave y atraumática diseñada para reducir la probabilidad de trauma del vaso in situ³

El diseño del lumen en Doble D maximiza el diámetro interno



MAHURKAR™* ELITE CATÉTER DE TRIPLE LUMEN 12.5FR

Tasas de flujo de hasta 400mL/min¹

El tercer lumen (3.2 Fr) facilita:

- Monitoreo de la presión venosa central
- Inyección de medios de contraste a alta presión.
- Hemodiálisis
- Aféresis
- Infusiones

El diseño del lumen en Doble D maximiza el diámetro interno



Diseño
Modificado
Doble-D™*



Preserva el acceso vascular del paciente,
reduciendo la necesidad de reemplazos
de accesos centrales

CARACTERÍSTICAS CLAVES DE LOS CATÉTERES

COMPONENTES	CANT	CATÉTER	KITS
Catéter	1	■	■
Aguja de Introductor 18G	1		■
Alambre guía con Avanzador de Dedo Pulgar J/Recto 0.035" x 70cm	1		■
Ala de Sutura Desmontable (Sólo catéteres pre-curvados)	1	■	■
Dilatador de Tejido 10Fr	1		■
Dilatador de Tejido, 12Fr (Sólo catéteres 12Fr y 12.5Fr)	1		■
Dilatador de Tejido, 14Fr (Sólo catéter 13.5Fr)	1		■
Apósitos Telfa™ Island	2		■
Tapas de Sellado (3 unidades con catéter 12.5Fr)	2	■	■



INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

MAHURKAR™* ELITE Catéteres de Doble Lumen 12Fr

	Extensiones rectas	Extensiones Curvas	Catéteres Precurvados	Descripción	Cant/caja
CÁTETERES	8888221113	8888222113	8888223113	12Fr x 13cm	5
	8888221116	8888222116	8888223116	12Fr x 16cm	5
	8888221120	8888222120	8888223120	12Fr x 20cm	5
	8888221124	8888222124		12Fr x 24cm	5
	8888221130			12Fr x 30cm	5
KITS	8888221213	8888222213	8888223213	12Fr x 13cm	5
	8888221216	8888222216	8888223216	12Fr x 16cm	5
	8888221220	8888222220	8888223220	12Fr x 20cm	5
	8888221224	8888222224		12Fr x 24cm	5
	8888221230			12Fr x 30cm	5



MAHURKAR™* ELITE

Catéteres de Doble Lumen de Alto Flujo 13.5Fr

	Extensiones	Extensiones	Cateteres	Descripcion	Cant/caja
	rectas	Curvas	Precurvados		
CÁTETERES	8888211113	8888212113	8888213113	13.5Fr x 13cm	5
	8888211116	8888212116	8888213116	13.5Fr x 16cm	5
	8888211120	8888212120	8888213120	13.5Fr x 20cm	5
	8888211124	8888212124		13.5Fr x 24cm	5
	8888211130			13.5Fr x 30cm	5
KITS	8888211213	8888212213	8888213213	13.5Fr x 13cm	5
	8888211216	8888212216	8888213216	13.5Fr x 16cm	5
	8888211220	8888212220	8888213220	13.5Fr x 20cm	5
	8888211224	8888212224		13.5Fr x 24cm	5
	8888211230			13.5Fr x 30cm	5

MAHURKAR™* ELITE

Catéteres de Doble Lumen de Alto Flujo 13.5Fr

	Extensiones	Extensiones	Descripcion	Cant/caja
	rectas	Curvas		
CÁTETERES	8888231113	8888233113	12.5Fr x 13cm	5
	8888231116	8888233116	12.5Fr x 16cm	5
	8888231120	8888233120	12.5Fr x 20cm	5
	8888231124	8888233124	12.5Fr x 24cm	5
	8888231130		12.5Fr x 30cm	5
KITS	8888231213	8888233213	12.5Fr x 13cm	5
	8888231216	8888233216	12.5Fr x 16cm	5
	8888231220	8888233220	12.5Fr x 20cm	5
	8888231224	8888233224	12.5Fr x 24cm	5
	8888231230		12.5Fr x 30cm	5





emed
Equipos y Consumibles Médicos

CONTÁCTANOS



9994451527



EMED-COMERCIALIZACION DE
EQUIPO MEDICO



@EMEDEQUIPOMEDICO



EMED.SERVICES



CALLE 7A #343 POR 42 Y 44
FRACCIONAMIENTO ARCOS DEL SOL,
MÉRIDA, YUCATNA, CP. 97203