

HyBase 3000

Mesa de operaciones eléctrica multiuso

Los materiales y la información de este folleto se distribuyen internacionalmente, pero es posible que no todos los productos y servicios mencionados en este folleto estén disponibles en su país o región. Póngase en contacto con la oficina o los distribuidores locales para confirmar la disponibilidad de los productos o servicios correspondientes.

Brazil
Dirección: Rua Joaquim Floriano, 488, floor Intermediário - cj 02, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, Brasil
Tel.: (55-11) 3078-8026

Canadá
Dirección: 4250 Kingsway, Suite 206, Burnaby, BC, Canadá, V5H4T7
Tel.: (1-604) 451-1199

Egipto
Dirección: 24th floor, 34 EL-Obour Buildings, Salah Salem Street, Heliopolis, Cairo, Egipto
Tel.: (20-2) 2260-9728

Francia
Dirección: Europarc Créteil Cedex 123, Chemin des Bassins 94000 Créteil, Francia
Tel.: (33-1) 4513-9145

Alemania
Dirección: Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim
Tel.: (49-6251) 17524-0

La India
Dirección: Unit No. 401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place Wazirpur District Centre, Nueva Delhi, 110 034, la India
Tel.: (91-11) 4923-0000

Indonesia
Dirección: Menara Dea 1, Suite 301, Kav E4 No.3/1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel.: (62-21) 576-2650

Italia
Dirección: Via Girardo Patecchio, 4 - 20141, Milán, Italia
Tel.: (39-02) 57402-4444

México
Dirección: Insurgentes Sur # 1787 Piso 2, Col. Guadalupe Inn, México D.F. 01020
Tel.: (52-55) 5661-9450

Países Bajos
Dirección: Saturnusstraat 17, 2132HB Hoofddorp, Países Bajos
Tel.: (31-23) 574-9656

Rusia
Dirección: Kondratyuka Str. 3 129515, Moscú
Tel.: (7-499) 553-6036

España
Dirección: Avenida Manoteras, 38, Bloque B, Bajo B008. Madrid, 28050, España
Tel.: (34-91) 392-3754

Turquía
Dirección: General Ali Rıza Gürkan Cad. Metropol Center No: 31 A Blok K.13 D.52 Merter/Estambul, Turquía
Tel.: (90-212) 482-0877

Reino Unido
Dirección: 3 Percy Road, St. John's Park, Huntingdon, Cambs, Pe29 6SZ, Reino Unido
Tel.: (44-1480) 416-840

Estados Unidos
Dirección: 800 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430-0619, Estados Unidos
Tel.: (1-800) 288 2121, (1-201) 995-8000



Filial

Centro de investigación y desarrollo



HyBase 3000

Mesa de operaciones

NUEVA

DISTRIBUTOR:



Mindray is the registered trademark owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
Hybase is the trademark owned by Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
© 2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights Reserved.
P/N: ES-HyBase 3000-210285x12-20111019

mindray
Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

mindray
healthcare within reach

HyBase 3000

Práctica funcionalidad, versatilidad y alta fiabilidad

Presentación funcional del panel remoto



Desplazamiento longitudinal hacia el lado de los pies de 100 mm



Desplazamiento longitudinal hacia el lado de la cabeza de 200 mm



Elevación de la mesa



Descenso de la mesa



Posición de Trendelenburg



Posición de Trendelenburg inversa



Giro a la izquierda



Giro a la derecha



Elevación de placa de respaldo



Descenso de placa de respaldo



Posición flexionada



Posición cóncava



Posición "0"



Elevación del reposacabezas



Descenso del reposacabezas



Elevación y descenso de la placa para piernas, 180° de separación



Flexibilidad máxima



Elevador integrado para puentes torácico y renal



Con un diseño especial adaptado a la cada vez más compleja infraestructura quirúrgica, HyBase requiere menos esfuerzo y tiempo para colocar al paciente en una posición segura, cómoda y práctica. Tras analizar las necesidades de los cirujanos y el personal de enfermería, la respuesta de Mindray es una mesa de operaciones que constituye una solución total e incluye lo siguiente:

- Colchón de mejor calidad para mayor comodidad de los pacientes
- Sistema de colocación del paciente seguro y práctico
- Tecnología para maximizar la versatilidad



- Colchón de descompresión con diseño antiestático, impermeable y de una pieza
- Desplazamiento longitudinal eléctrico hacia el lado de la cabeza de 200 mm
- Desplazamiento longitudinal eléctrico hacia el lado de los pies de 100 mm, que proporciona más espacio para ginecología y urología
- Capacidad para 185 kg en posición normal
- Alimentación por batería para 50-80 intervenciones
- Sistema de freno mecánico para una estabilidad óptima
- Restablecimiento de la posición original con un botón
- Posición flexionada y cóncava con un botón
- Placa radiotransparente para facilitar el acceso al brazo en C
- Tres paneles de control con panel remoto, control de reserva y pedal

Gama perfecta de productos Mindray para quirófano

Los productos fiables e innovadores de Mindray se complementan a la perfección entre sí para ofrecerle el mejor servicio posible.



HyBase 3000

La técnica de posicionamiento más adecuada para todas las disciplinas quirúrgicas

El éxito de una operación comienza con el perfecto posicionamiento del paciente y para ello se necesita un acceso cómodo, resultados excelentes, ahorro de tiempo y eficiencia. La excepcional flexibilidad de HyBase 3000 junto con sus diversos accesorios hace posible proceder a cualquier posicionamiento del paciente de manera rápida y segura.



Posición para intervención intervertebral
Accesorio:
0092-30-102639 Almohadilla para intervenciones intervertebrales (espuma viscoelástica, una pieza)
115-005864-00 Almohadillas de sujeción para la cabeza (280 x 240 x 140 mm)
0092-30-102634 Placa para brazos



Posición para cirugía rectal
Accesorio:
115-007049-00 Dispositivo de colocación para intervenciones rectales
115-005864-00 Almohadillas de sujeción para la cabeza (280 x 240 x 140 mm)
0092-30-102640 Correa para el tronco, una pieza
0092-30-102634 Placa para brazos



Posición para intervención en brazos o manos
Accesorio:
115-007047-00 Mesa de operaciones para brazos
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)



Posición supina general para intervención con movimiento longitudinal hacia el lado de la cabeza de 200 mm
Accesorio:
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)

Usamos acero inoxidable de alta calidad para las mesas de operaciones y los accesorios. Para facilitar el acceso de los cirujanos al brazo en C, las almohadillas y las placas son radiotransparentes para los exámenes radiográficos. Para evitar lesiones en áreas sensibles de los pacientes, suministramos almohadillas de gel de textura similar al tejido humano para colocar a los pacientes.



Posición general para intervención de tiroides



Posición para intervención oftálmica
Accesorio:
115-007045-00 Placa para intervenciones oftálmicas
115-005857-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



Posición para neurocirugía
Accesorio:
115-005695-00 Reposacabezas en forma de herradura ajustable
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



El adaptador para neurocirugía permite conectar el marco Mayfield
Accesorio:
0092-30-102642 Adaptador de reposacabezas para neurocirugía

Nota: todas las posiciones del paciente que se muestran en este folleto son solamente ejemplos y no representan ningún criterio médico.

HyBase 3000

La técnica de posicionamiento más adecuada para todas las disciplinas quirúrgicas

Desarrollados en estrecha colaboración con los usuarios finales, estos accesorios satisfacen todas las necesidades que surgen durante los procedimientos de colocación para la intervención quirúrgica y permiten colocar a los pacientes de forma óptima tanto para los cirujanos como para los pacientes.



Posición de litotomía para ginecología y urología
Accesorio:
115-007043-00 Un pieza de soporte para piernas con cintas y una abrazadera radial universal ligera
115-005697-00 Cubeta de desagüe para ginecología y urología



Posición de litotomía
Accesorio:
0092-30-102635 Soporte para piernas pesado de una pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa de sujeción (una pieza).
115-005697-00 Cubeta de desagüe para ginecología y urología



Posición lateral para cirugía mínimamente invasiva
Preparación rápida para cirugía mínimamente invasiva con elevador integrado de 120 mm



Posición lateral para cirugía mínimamente invasiva
Accesorio:
0092-30-102634 Placa para brazos
0092-30-102648 Soporte de brazos para posición lateral
0092-30-102638 Soporte para partes grandes del cuerpo
0092-30-102669 Soporte para partes pequeñas del cuerpo
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (200 x 70 x 50 mm)
115-005811-00 Almohadillas para brazos y piernas laterales (500 x 150 x 40 mm)



Posición para intervención femoral
Accesorio:
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte



Posición lateral para intervención femoral
Accesorio:
115-007057-00 Extensión de fémur lateral
115-009425-00 Extensión para ortopedia preseleccionada



Posición para intervención de tibia
Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Extensión para ortopedia preseleccionada



Posición para intervención de tibia
Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte



Traumatología para el cuello del fémur
Accesorio:
115-007055-00 Extensión de tibia
115-009425-00 Dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte

Hybase 3000

Todas las características fiables e innovadoras de Mindray




Gracias a los nuevos cojines de SFC (con núcleo de espuma especial), HyBase 3000 proporciona una excelente distribución de la presión, evita en gran medida los efectos adversos de la posición de decúbito, reduce el porcentaje de riesgos postoperatorios para la salud y acelera la recuperación del paciente.



El extraordinario material GORE-TEX es respirable, impermeable, no inflamable, antiestático y cumple con los estándares de higiene.



El pedal proporciona una máxima seguridad y es fácil de usar.

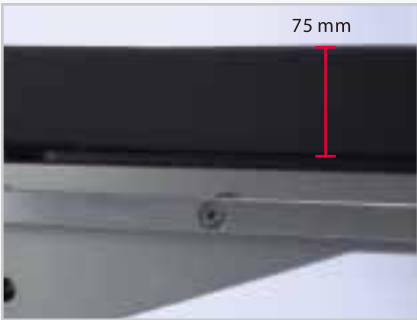

El paciente se sentirá verdaderamente cómodo gracias a sus almohadillas con 75 mm más de grosor y doble capa en el interior.



Los cojines pegados o cosidos de manera habitual no pueden lavarse directamente, por lo que la limpieza de las manchas de sangre y fluidos, que pueden constituir un peligro para la salud tanto de cirujanos como de pacientes, constituye un problema. Gracias a la tecnología avanzada de sellado por ultrasonido, nuestro excelente cojín impermeable no le planteará ese problema.



La alimentación por batería dura de 50 a 80 intervenciones. Teclas de control de reserva en caso de fallo del control manual.

Control de reserva
Desplazamiento longitudinal*
hacia arriba/abajo
Trendelenburg
Trendelenburg inversa
Giro a izquierda/derecha
Elevación/descenso de la
placa de respaldo


*Función opcional

HyBase 3000


Mesa de operaciones eléctrica multiuso

Especificaciones técnicas


Dimensiones	
Longitud total	2.060 mm
Altura sin almohadillas	720 mm-1.070 mm
Anchura sin riel lateral	520 mm
Anchura con riel lateral	590 mm

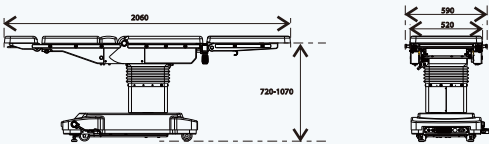


Posición de Trendelenburg	
Trendelenburg	Máx. 30°
Trendelenburg inversa	Máx. 30°

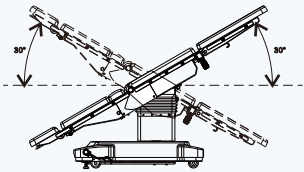


Placas para piernas	
Elevación de placas para piernas	Máx. 20°
Descenso de placas para piernas	Máx. 90°

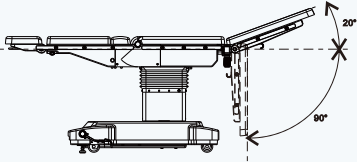


Posición cóncava	
Posición cóncava	110°
Trendelenburg	25°
Montaje hacia arriba	45°

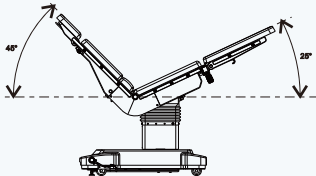


Desplazamiento longitudinal (opcional)	
Desplazamiento de extremo de cabeza	Máx. 200 mm
Desplazamiento de extremo de piernas	Máx. 100 mm

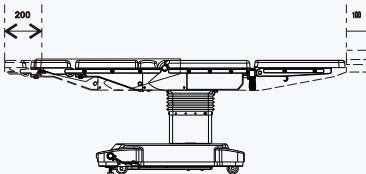


Inclinación lateral	
Inclinación a la izquierda	Máx. 25°
Inclinación a la derecha	Máx. 25°

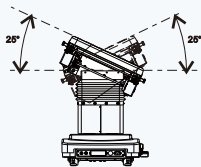


Placa para espalda	
Elevación de placa de respaldo	Máx. 80°
Descenso de placa de respaldo	Máx. 40°

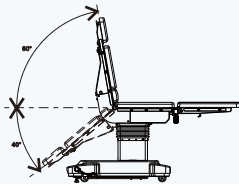

Placa para cabeza	
Desplazamiento normal de placa para cabeza	Máx. 45°
Desplazamiento extendido de placa para cabeza	Máx. 90°

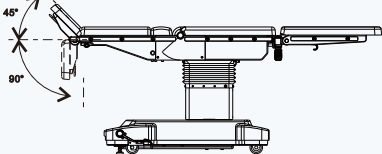

Posición flexionada	
Posición flexionada	220°
Trendelenburg inversa	20°
Montaje hacia abajo	20°

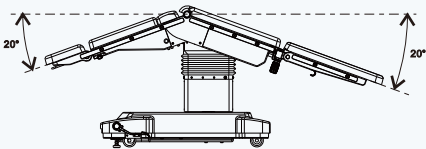

Elevador de tronco (opcional)	
Elevación de elevador de tronco	Máx. 120 mm

